


GQCT スリットファントム

PAM-01

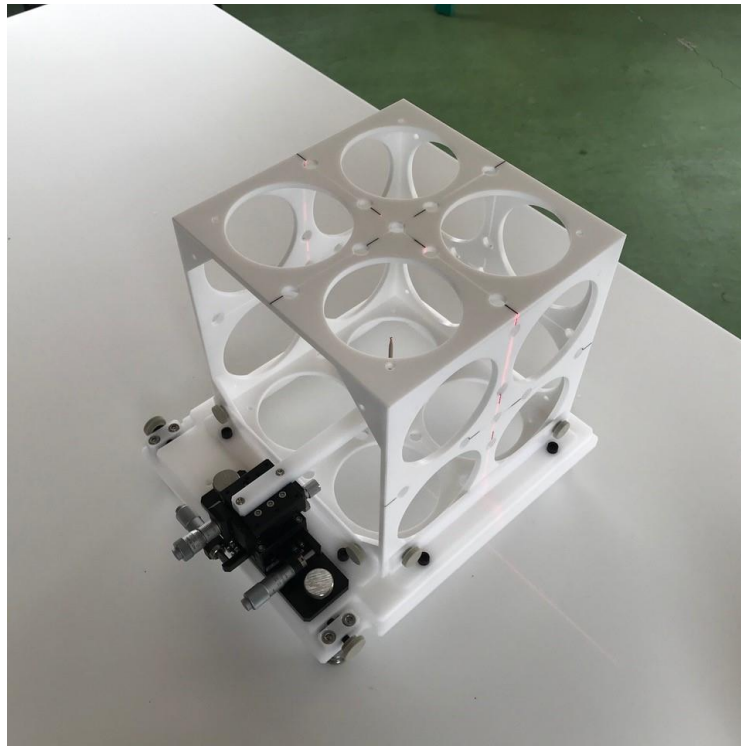

IGRT(Image-Guided Radiation Therapy)の普及により高精度の放射線治療が可能となった。ビーム軸, Linac の回転中心, IGRT画像中心, レーザ中心の3点とアイソセンタの一致を検証するファントムである。

素材: アクリル

寸法: スリットファントム 200x200x200mm, 組立寸法 250x320 H 260mm

重量: スリットファントム 530g, アライメントベース 960g, BBステージ 570g

改良のため予告無く仕様を変更する場合があります。

製造会社

株式会社 P. A. lab

住所

東京都中野区弥生町3-24-11-203

TEL: 03-6276-2082

FAX: 03-6276-1751

販売会社

メディカル・エキスパート株式会社

住所

東京都中央区新川2-30-11

新川OMKビル

TEL: 03-3523-6254

FAX: 03-3523-6254